



Afinion HbA1c Snabbguide

Förberedelser inför analys



AFINION™ HbA1c Testkassett

- Förvara i kylskåp (2–8 °C) fram till utgångsdatum eller i rumstemperatur (15–25 °C) i högst 90 dagar.
- Rumstempera testkassett (18–30°C) före användning. Minst 15 minuter i oöppnad foliepåse.
- Använd testkassett inom 10 minuter efter att foliepåsen öppnats.
- Håll testkassetten i dess handtag.

Patientprov

- Kapillärblod eller venöst helblod (med EDTA, heparin, citrat eller NaF).
- Venöst helblod med antikoagulantia (ej NaF) kan förvaras i kylskåp (2–8 °C) i 10 dygn eller i rumstemperatur (18–30 °C) i 8 timmar.
- Kapillärblod kan inte sparas.
- Blanda venöst blod genom att vända på röret 8–10 gånger före användning.
- Fyll kapillären genom att enbart nudda bloddroppens yta.

AFINION™ HbA1c Kontroll

- Förvara i kylskåp (2–8 °C). Öppnad Kontroll är hållbar i 60 dagar.
- Rumstempera kontroll (15–25°C) före användning, cirka 45 minuter.
- Blanda kontrollen noggrant genom att skaka flaskan i 30 sekunder före användning. Vortexblandare kan användas.
- Fyll kapillären genom att enbart nudda kontrollvätskans yta ca 2–3 sekunder.
- Streckkod med kontroll-ID finns på bipacksedeln i kontrollförpackningen.
- Det uppmätta värdet ska ligga inom Regionens accepterade gränser.

AFINION™ 2-instrumentet

- Starta instrumentet. Ett självtest utförs.
- Analysera patientprov eller kontroll i enlighet med testprocedur på omstående sida.
- Öppna aldrig luckan manuellt och håll den stängd när instrumentet inte används.
- En informationskod kan visas under analys. Möjliga orsaker och förslag på åtgärder finns i instrumentets användarmanual.


Informationskoder som är specifika för AFINION™ HbA1c-analysen:	
Kod	Orsak
103	Hemoglobin under 60 g/L
104	Hemoglobin över 200 g/L
105	HbA1c under mätintervallet
106	HbA1c över mätintervallet




Läs användarinstruktionerna till AFINION™ för fullständig information:

- Bipacksedel till Afinion HbA1c.
- Bipacksedel till Afinion HbA1c Control.
- Användarmanual till **AFINION** 2-instrumentet.

Testprocedur

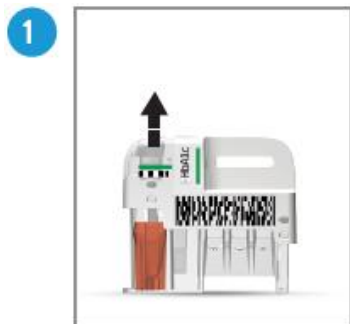

1 Dra provtagningsenheten rakt upp från testkassetten. Undvik att röra vid kassetterns nedre del.

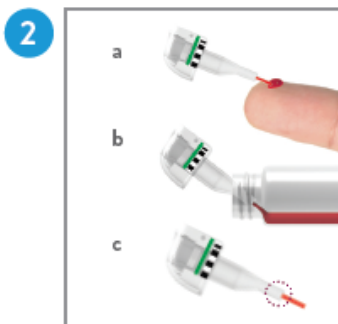



2 Fyll kapillärroret helt (c) med patientprov (a) eller kontroll (b). Torka inte av kapillärroret.



3 Sätt omedelbart tillbaka provtagningsenheten. Analysen av testkassetten måste startas inom 2-3 minuter.



4 Tryck på  för patientprov eller på  för kontroll. Luckan öppnas automatiskt.


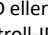
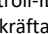


5 Sätt in testkassetten med streckkoden åt vänster.




6 Stäng luckan manuellt för att starta analysen.



7 Ange operatörs-ID och tryck sedan på  för att ange patient-ID eller  för att ange kontroll-ID. Tryck på  för att bekräfta.



8 Anteckna resultatet när det visas på skärmen. Tryck på  för att godkänna. Luckan öppnas automatiskt.



9 Kasta den använda testkassetten och stäng luckan manuellt. Håll den stängd när instrumentet inte används.

Patient-/kontroll-ID bör anges direkt efter analysstart, innan instrumentet låser sig för inmatning medan analys körs.



Patient-/kontroll-ID kan även anges mot slutet av analysen.

