


No.	LUFTVÄGSPANEL I-IV	PROVTAGNING
I	1. Influenza A 2. Influenza B 3. RS virus 4. Metapneumovirus	Se: Panel II
II	1. Adenovirus 2. Enterovirus 3. Parainfluenzavirus 1 4. Parainfluenzavirus 2 5. Parainfluenzavirus 3 6. Parainfluenzavirus 4 7. Coronavirus NL63 8. Coronavirus 229E 9. Coronavirus OC43/HKU1 10. Metapneumovirus 11. Rhinovirus 12. Bocavirus	<p><b>För övre luftvägsprov</b> rekommenderas i första hand NPH aspirat ("sugprov")</p> <p><b>För NPH-sekret:</b> används <u>E-swab</u> rör med tillhörande pinne. Utförande: Provtagningspinnen förs försiktigt längs näshålans botten mot bakre svalgväggen med en roterande rörelse. Låt pinnen ligga kvar några sekunder. Stoppa pinnen i röret med vätska och bryt av pinnen vid skåran.</p> <p><b>Sputum, BAL och trachealsekret:</b> tas i sterilt rör utan tillsatser, <u>minst 0,5ml.</u></p>
III	1. <i>Mycoplasma pneumoniae</i>  2. <i>Chlamydomphila pneumoniae</i>	<p><b>Nedre luftvägsprov, sputum, trachealsekret eller bronksköljvätska:</b> i sterilt rör, <u>minst 0,5ml.</u></p> <p><b>Bakre svalgprov:</b> taget med provpinne som stoppas i <u>E-swab</u> rör, alternativt koksaltlösning.</p>
IV	1. <i>Mycoplasma pneumoniae</i> 2. <i>Chlamydomphila pneumoniae</i> 3. <i>Legionella pneumophila</i> 4. <i>Bordetella pertussis</i> 5. Bordetella Parapertussis	<p><b>Nedre luftvägsprov, sputum, trachealsekret eller bronksköljvätska:</b> i sterilt rör, <u>minst 0,5ml.</u></p> <p><b>Bakre svalgprov:</b> taget med provpinne som stoppas i <u>E-swab</u> rör, alternativt koksaltlösning.</p> <p><b>Legionella:</b> Nedre luftvägsprover rekommenderas i första hand: sputum, trachealsekret eller bronksköljvätska och övriga bronkoskopiska prover, <u>minst 0,5ml</u> i sterilt rör. Övre luftvägsprover, svalg och NPH kan analyseras men har sämre känslighet</p> <p><b>Bordetella:</b> NPH-prov, pinne eller aspirat rekommenderas i första hand. Svalgprov och nedre luftvägsmaterial kan analyseras men har troligen lägre känslighet.</p>

För ytterligare information se, Provtagningsanvisningar:

<https://webappl.vll.se/App/Novo/QNprod.nsf/1/8BFF04EF16EC7779C12581EF0030D053?OpenDocument>

ESwab Svalg/Annat: Economa: 5430

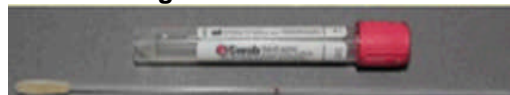

ESwab NPH: Economa: 4451

