

## Sortiment lyftselar och tillbehör

Alla produkter samt artikelnummer hittar du i  
sortimentskatalogen i websesam

---

### Hygienselar

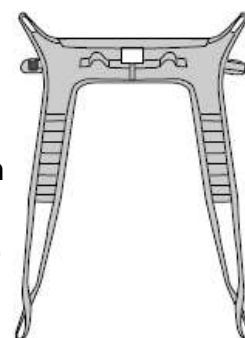
---

**Namn** Byxsele modell 41, förstyvade benstöd, med skärpLeverantör: LIKO [www.liko.se](http://www.liko.se)

Storlek: XS – XL

Material: Polyester

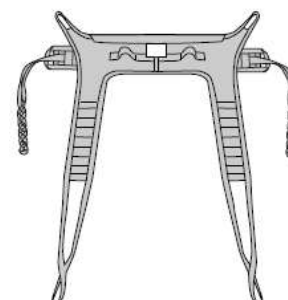
Beskrivning: Liko Byxsele är utformad för att underlätta av- och påklädning i samband med lyft till och från toalett.  
Brukarens armar ska alltid vara på Byxselens utsida för säkerhetens skull.

**Namn** Byxsele modell 45, förstyvade benstöd, trygghetsskärpLeverantör: LIKO [www.liko.se](http://www.liko.se)

Storlek: XS – XL

Material: Polyester

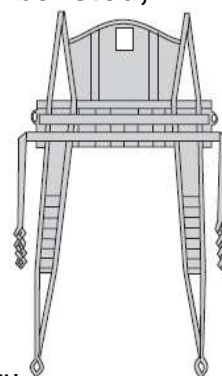
Beskrivning: Modell 45 påminner mycket om modell 41, skillnaden är trygghetsskärpet som är en extra säkerhet för den som tenderar att sjunka ned i selen

**Namn** Hygiensele modell 55, hög rygg, förstyvade benstöd, trygghetsskärpLeverantör: LIKO [www.liko.se](http://www.liko.se)


Storlek: XS – XXXL

Material: Polyester

Beskrivning: Hygienselen har en omslutande västdel som lyfter med ett stadigt stöd för överkroppen.  
Den generösa uringningen runt stussen lämnar samtidigt fritt för av- och påklädning under lyftmomentet i samband med toalettbesök.



---

<b>Namn</b>	<b>Active Micro Plus, förstyvade benstöd</b>	
Leverantör:	Guldmann <a href="http://www.guldmann.com">www.guldmann.com</a>	
Storlek:	XS – XXL	
Material	Polyester	
Beskrivning:	Hygiensele med stödband för toalettbesök och andra hygienprocedurer. Selen stödjer den övre delen av kroppen och man kan justera det elastiska stödbandet så det passar varje enskild användare	

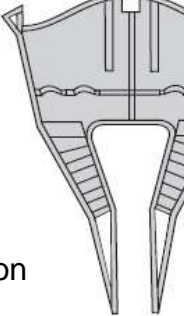
---

## Amputationsseklar

---

<b>Namn</b>	<b>Custom Amputee, förstyvade benstöd</b>	
Leverantör:	Guldmann <a href="http://www.guldmann.com">www.guldmann.com</a>	
Storlek:	XS – XL	
Material	Polyester	
Beskrivning:	Selen är utformad för att lyfta och flytta personer med ett eller båda benen amputerade över knäet och för att lyfta personer med helt amputerade ben.	

---

<b>Namn</b>	<b>Amputationssele modell 75, förstyvade benstöd</b>	
Leverantör:	LIKO <a href="http://www.liko.se">www.liko.se</a>	
Storlek	S – XL	
Material:	Polyester	
Beskrivning:	Amputationssele är speciellt designad för att användas för brukare med relativt hög amputation av bägge benen. Den rekommenderas även till andra brukare som har en tendens att glida ur andra lyftselar av liknande typ. Amputationssele kan även vara lämplig vid lyft av andra brukare, exempelvis med ensidig benamputation	

---

---

## Övriga lyftselar med benstöd

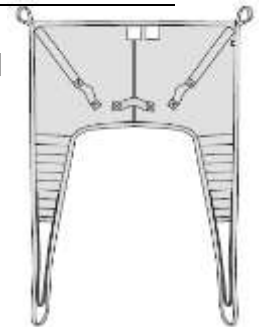
---

<b>Namn</b>	<b>Basic Low, förstyvade benstöd</b>
Leverantör:	Guldmann <a href="http://www.guldmann.com">www.guldmann.com</a>
Storlek:	XS - XXL
Material:	Polyester
Beskrivning:	Basic Low är en lyftsela för allmänt bruk. Den används vid allmänna överflyttningar av personer med god funktion i överkroppen och stödjer nedre delen av ryggen och höften.



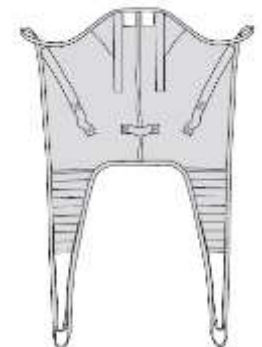
---

<b>Namn</b>	<b>Universalsele modell 000, förstyvade benstöd</b>
Leverantör:	LIKO <a href="http://www.liko.se">www.liko.se</a>
Storlek:	S – XL
Material:	Polyester eller nätpolyester
Beskrivning:	Universalselen är en basmodell som är konstruerad för att anpassa sig till brukaren utan individuella inställningar. Universalselen ger en upprätt sittställning med stöd för hela ryggen upp till nacken.



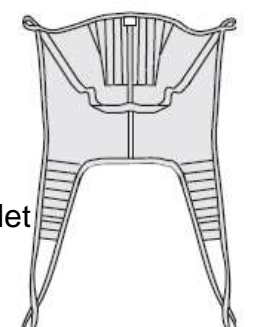
---

<b>Namn</b>	<b>Originalsele modell 200, förstyvade benstöd</b>
Leverantör:	LIKO <a href="http://www.liko.se">www.liko.se</a>
Storlek:	XS – XL
Material:	Nätpolyester
Beskrivning:	Lyftselen ger en något bakåtlutad sittställning och ett bra stöd för hela kroppen vilket passar bra för brukare med nedsatt bålstabilitet. Lyftselen rekommenderas även vid lyft till eller från golv




---

<b>Namn</b>	<b>Originalsele modell 26, förstyvade huvud- och benstöd</b>
Leverantör:	LIKO <a href="http://www.liko.se">www.liko.se</a>
Storlek:	M-slim – XXL
Material:	Polyester
Beskrivning	Lyftselen kan användas vid alla vanliga förekommande lyftsituationer. Det mjuka förstyvade huvudstödet ger ett extra bekvämt stöd för huvudet



---

<b>Namn</b>	<b>Skalsele modell 22</b>	
Leverantör:	LIKO <a href="http://www.liko.se">www.liko.se</a>	
Storlek:	XS – L	
Material:	Nätpolyester	
Beskrivning:	Lyftselen ger en något tillbakalutad sittställning och ett bra stöd för hela kroppen. Brukaren kan hålla armarna antingen utanför eller innanför selen. Huvudstödet är justerbart. Design och material gör Skalselen särskilt lämplig i samband med lyft till formgjutna sitsar.	

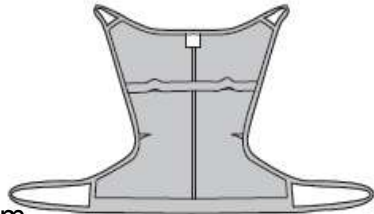
---

<b>Namn</b>	<b>Multiband</b>	
Leverantör:	LIKO <a href="http://www.liko.se">www.liko.se</a>	
Storlek:	Bredd 10cm, bredd 25 cm	
Material:	Polyester	
Beskrivning:	Multibandet är utvecklat för att lyfta och hålla armar, ben eller andra kroppsdelar vid exempelvis behandling eller tvättning.	

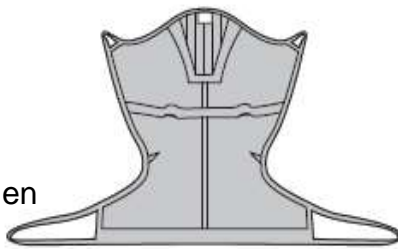
---

## Helselar

---

<b>Namn</b>	<b>Comfortsele Plus modell 300</b>	
Leverantör:	LIKO <a href="http://www.liko.se">www.liko.se</a>	
Storlek:	S – XL	
Material:	Nätpolyester	
Beskrivning:	Axelhög lyftsele, lämplig för brukare som är särskilt ömtåliga på grund av smärta eller ledbesvär. Selen är i många fall även lämplig för amputerade då den ger stöd under hela sittytan.	

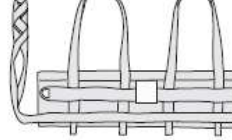
---

<b>Namn</b>	<b>Comfortsele Plus modell 350</b>	
Leverantör:	LIKO <a href="http://www.liko.se">www.liko.se</a>	
Storlek:	S - XL	
Material:	Nätpolyester	
Beskrivning	Lyftselen har inbyggt huvudstöd och ger en bekväm bakåtlutad sittställning. Lämplig för brukare med dålig bål- och huvudstabilitet	

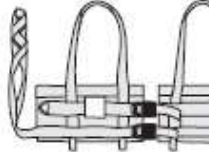
---

## Gå- ståselar

---

<b>Namn</b>	<b>Lyftväst modell 60</b>	
Leverantör:	LIKO <a href="http://www.liko.se">www.liko.se</a>	
Storlek:	S – XXL	
Material:	Polyester	
Beskrivning:	Lyftvästen lyfter runt överkroppen och ibland under armarna. Lyftprincipen förutsätter en viss stabilitet hos brukaren som avlastar en del av kroppstyngden via ben och fötter.	

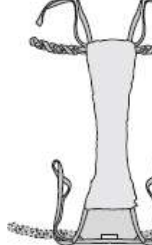
---

<b>Namn</b>	<b>Lyftväst modell 64</b>	
Leverantör:	LIKO <a href="http://www.liko.se">www.liko.se</a>	
Storlek:	S – XXL	
Material:	Polyester	
Beskrivning:	Den framknäppta lyftvästen är försedd med två reglerbara säkerhetsspännen fram på bröstet, detta rekommenderas i de fall man vill kunna reglera spänningen och det tryck som kan uppstå på bröstet.	

---

<b>Namn</b>	<b>Grenband till Lyftväst modell 60/64</b>	
Leverantör:	LIKO <a href="http://www.liko.se">www.liko.se</a>	
Storlek:	XXS – XL	
Material:	Polyester	
Beskrivning:	Grenbanden motverkar att lyftvästen glider upp på kroppen. Banden kan appliceras när brukaren sitter, efter uppresning kan man justera läge och spänning. Grenbanden kan appliceras korsade eller okorsade i Grenen.	

---

<b>Namn</b>	<b>Lyftbyxa modell 92</b>	
Leverantör:	LIKO <a href="http://www.liko.se">www.liko.se</a>	
Storlek:	S – XL	
Material:	Polyester	
Beskrivning:	Lyftbyxan underlättar trygg och säker stå- och gåträning för den som har dålig balans och dålig funktion i benen. Kan passa brukare som är känslig för tryck mot överkroppen.	

---

## Tillbehör

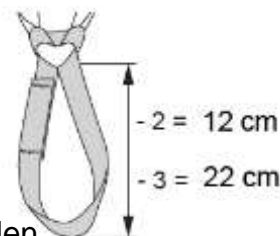
---

**Namn** Förlängningsögla, grönLeverantör: LIKO [www.liko.se](http://www.liko.se)

Storlek: 12cm, 22cm

Material: Polyester

Beskrivning: Avsedda för enklare anpassning och monterar på bandöglor för att justera längden efter behov.



---

**Namn** Polstrad hylsa för axelbandLeverantör: LIKO [www.liko.se](http://www.liko.se)

Storlek: en storlek

Material: Polyester

Beskrivning: Tryckavlastande polstringshylsor för montering på de främre axelbanden. Passar hygiensele modell 55, lyftväst modell 60/64 och lyftbyxa modell 92. Kardborreband finns längst ena långsidan för att underlätta applicering.



---

**Namn** Polstringshylsor för benstödLeverantör: LIKO [www.liko.se](http://www.liko.se)

Storlek: Se beställningsunderlag hemsida/överflyttning

Material: Polyester

Beskrivning: Tryckavlastande polstrade fodral som är försedda med syntetiskt fårskinn på ena sidan och lyftselens tygmateriel på den andra.



---

**Namn** Handy glidlakanLeverantör: LIKO [www.liko.se](http://www.liko.se)

Storlek: 70x70 cm

Material: Polyamid

Beskrivning: Appliceringshjälp med mycket låg friktion. Små fastsydda fickor underlättar applicering av lyftsele i t ex trång rullstol



---

**Namn** ÖggleclipsLeverantör: LIKO [www.liko.se](http://www.liko.se)

Beskrivning: För markering av vilken lyftögla som ska användas

